


ご利用規約

1. このサービスは、当社が発売したすべての機種の取扱説明書を提供しているわけではございません。商品には取扱説明書を補足するために「操作ガイド」など取扱説明書以外の印刷物が同梱されている場合がありますが、このサービスでは、それらの印刷物を含んでおりません。お探しの取扱説明書が見つからない場合は、ご購入店、お近くの販売店、または最寄りの弊社サービス窓口を通じて、お問い合わせいただきますようお願いいたします。
2. 取扱説明書の内容は、商品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。このサービスで提供している取扱説明書の内容は、商品本体に同梱されている取扱説明書の内容と異なる場合があります。
3. 安全上のご注意は、取扱説明書が制作された時点での法令や業界における基準に応じた内容になっています。
4. 公開している取扱説明書は、商品をご購入いただいたお客様がご覧になることを想定しています。商品を購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合がありますことをご了承ください。
5. 取扱説明書の著作権は株式会社アデランスに帰属しております。個人的な利用を目的とする印刷・保存等、その他著作権法で認められる場合を除き、取扱説明書を事前の許諾なしに、複製、改変、第三者への共有、送信することは禁止されています。
6. このサービスの利用、あるいは利用できなかったことにより、万一、損害が生じても、当社は、当社に故意または重大な過失が認められる場合を除き、一切その責任を負いません。
7. このサービスは、予告なく中止または内容を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

DoRAISE アイスクリーン PRO

取扱説明書 兼 保証書

家庭用

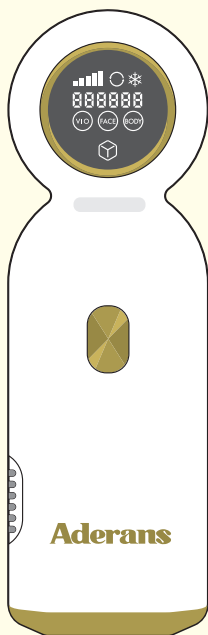

このたびは本製品をご購入いただき、ありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき、正しい使用方法をご理解ください。また、使用する前は必ず「安全上のご注意」をお読みください。お読みになった後も、大切に保管してください。













※デザイン・仕様等は改良のため予告なしに変更する場合がございます。

目次

●使用できる肌色の目安	3
●安全上のご注意	4
●製品仕様	13
●同梱品の確認	14
●各部名称	15
※冷感モードについて	16
●ご使用前に	
プレテスト	17
使用を控える場合	18
使用を避ける部位	19
●使い方	
基本的な使い方	20
腕・脚への使い方	22
お顔への使い方	26
VIOゾーンへの使い方	27
●使用後のお肌のお手入れ	29
●使用頻度について	30
●本体のお手入れ・保管について	31
●こんなときは	32
●無料保証規定	34
●保証書	35

使用できる肌色の目安

●お肌とムダ毛の色をご確認ください。

肌の色 毛の色	薄い ← → 濃い					
						
黒 	○	○	○	○	○	×
焦茶 	○	○	○	○	○	×
茶 	○	○	○	○	○	×
金 	×	×	×	×	×	×
赤 	×	×	×	×	×	×
白 	×	×	×	×	×	×

IPL(インテンス・パルス・ライト)は、メラニン色素に反応して熱を与え、ムダ毛のケアを行います。そのため、メラニン色素の少ない色の薄い毛には効果が薄く、お肌への負担のみが増えてしまいます。

また、お肌のメラニン色素が多すぎる場合、お肌への負担が大きくなり、本製品の使用により火傷や皮膚トラブルの危険性が高くなります。

上の表を参考に、**×**に該当するケースでは本製品の使用を控えてください。

安全上のご注意

本書では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を見逃し誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく内容を示しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が想定される内容を示しています。



誤った取扱いをしたときに、傷害を負ったり財産の損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



してはいけない
禁止の行為です。



必ず実行していただく
強制の行為です。

日本国内専用

この製品は日本国内での使用を前提に設計されているため、海外では使用しないでください。無料保証規定の対象外となります。

危険

使用の禁止



- 医用電気機器を使用している場合、本製品を使用しない。

医用電気機器の誤動作の原因となり、死亡を含む重大な健康被害を引き起こす危険があります。ペースメーカーなどをお使いの方の近くで本製品を使用しないでください。

- 熱さや痛み、眩しさなど、自ら意思表示の困難な方への使用はしない。

重症の火傷や皮膚炎、失明などの危険があります。自ら意思表示の困難な高齢者や、乳幼児、睡眠中の方、また知覚障害の方などへは本製品を使用しないでください。

- 本製品の照射部の光を直視しない。

使用時には、**本製品付属のサングラスを装着してください。または光を直視しないでください。**サングラスを装着した状態でも、照射部の光が目に入らないよう、十分ご注意ください。失明を含む、視力障害を負う危険があります。

警告

身体的トラブルへの注意

● 下記にあてはまる方は使用しない。

5ページ「危険」の項目に挙げている方その他、下記に当てはまる方は本製品の使用を避けてください。皮膚トラブルや症状の悪化などの原因となります。

下記にあてはまらなくとも、使用に不安のある方や病気治療中の方は医師と相談のうえ使用を判断してください。

○怪我をしている人 ○光線過敏症の診断を受けている方 ○妊娠中や授乳中、生理中の方 ○皮膚知覚障害の方 ○アトピー性皮膚炎・湿疹・ヘルペスなど皮膚疾患のある人 ○アレルギー体質の方 ○化粧品・衣類・金属などにかぶれやすい体質の方 ○太陽光で肌が荒れやすい人 ○過去に光美容器でトラブルのあった方

● 下記の場合には使用しない。

火傷や皮膚炎、その他健康被害の原因となります。

○体調のすぐれないときや、肌・身体に異常を感じるとき

○入浴直後の肌に赤みやほてりが残っているとき

○眠気を伴う薬を服用中の方、その他強めの副作用を伴う薬を服用中の方



身体的トラブルへの注意

● 下記の部位には使用しない。

火傷や皮膚炎、視力障害などの原因となります。

○日焼けした肌 ○肝斑、シミ、ほくろなど黒褐色または黒色の肌部分 ○かさぶた、傷、湿疹、あざ、いぼ、吹き出物、皮膚がん、たむし(白せん)、毛のう炎、毛包炎、かぶれ、虫刺されなど ○入れ墨のある部分 ○メイクの残っている部分 ○ピアス等アクセサリーのある部分 ○目およびその周辺(まつ毛/眉毛等) ○頭髮 ○口腔内など粘膜の部位



● 成長期の子どもへは使用しない。

成長期のお子さまへの本製品の使用は皮膚トラブルなど、思わぬリスクを伴う危険があります。18歳未満の人が使用する際は保護者の方が取扱説明書を読み、正しい使い方・禁止事項をご指導ください。

● 他の光照射型的美容器と併用しない。

お肌への負担が増え、火傷や皮膚トラブルの原因となります。

● 暗い場所で使用しない。

暗い場所では、目が光に対して敏感になります。サングラスをした状態でも視力障害の原因となる可能性があります。必ず、明るい部屋で使用してください。

● 周囲に他の人がいる場合は使用しない。

使用時、他の人、子どもやペットがいる場合は使用しないでください。照射光により、視力障害の原因となります。

身体的トラブルへの注意



- **使用中や使用後に身体の異常や不快感を感じたら使用を中止する。**

本製品の使用中または使用後に、お肌に炎症（赤くなるなど）が発生した場合は使用を中止し、2日たっても炎症が続く場合には皮膚科医に相談してください。

- **取扱説明書に記載の使用頻度を守る。**

使用頻度が高すぎるとお肌への負担が増え、火傷や皮膚トラブルの原因となります。（30ページ参照）

- **ケア後24時間は照射した部位の極度な日焼けを避ける。**

皮膚トラブルの原因となります。また、24時間経過後も赤みが見られる場合は、赤みが消えるまで紫外線を避けてください。

目的外使用の禁止



- **ムダ毛ケアの用途以外への使用はしない。**

取扱説明書記載の用途・用法に従って使用してください。事故や故障の原因となります。

- **動物への使用はしない。**

事故や故障の原因となります。

- **業務用での使用はしない。**

本製品は家庭用です。

- **屋外で使用しない。**

本製品は屋内用です。

感電・発火等の事故への注意



- **本体・ACアダプタの通電部に金属やゴミを付着させない。**
感電や故障の原因となります。
- **濡れた手で本体に触れない。**
感電や故障の原因となります。
- **水に濡れる可能性のある場所で使用・保管しない。**
感電や故障の原因となります。
- **使用時は本体の通気／放熱口をふさがない。**
内部に熱がこもり、故障の原因となります。
- **本体・ACアダプタに異常がある場合は使用しない。**
使用前に本体やACアダプタに変形や破損、コード部分に被膜の破れなどがないかご確認ください。異常があるまま使用すると、感電や発火等の原因となります。



- **使用中に本体・ACアダプタに異常が発生した場合は使用を中止する。**
異常な発熱や発火・異臭がある場合にはACアダプタをコンセントから外してください。その後も使用はせず、販売元、またはお客様ご相談窓口までご連絡ください。
- **電源OFF操作後、シャットダウンしてからACアダプタを外す。**
シャットダウン前にACアダプタを外すと、感電や故障の原因となります。
- **本体を使用しない場合はACアダプタを外す。**
感電や故障の原因となります。

改造の禁止



- **本体・ACアダプタを分解・改造しない。**

感電や故障の原因となります。故障の際はお客様ご自身で修理を試みず、販売元、またはお客様ご相談窓口までご連絡ください。

- **本体・ACアダプタに異物を入れない。**

感電や故障の原因となります。

使用前のご注意



- **使用前に使用部位のメイクなどを落とし、アクセサリを外す。**

火傷や皮膚トラブルの原因となります。

- **使用前に使用部位のムダ毛を短くカットする。**

ムダ毛が長いまま照射を行うと、皮膚表面のムダ毛が焦げたり、火傷の原因となります。本製品の使用前には必ず、シェーバーなどでムダ毛を短くカットしてください。

- **シェービングクリームなどを使用した場合は、よく洗い流し、その後水分を拭き取る。**

使用部位が濡れたままの状態では本製品を使用すると、火傷や皮膚トラブルの原因となります。



- **使用前に化粧水や乳液などをつけない。**

火傷や皮膚トラブルの原因となります。

使用・保管場所についてのご注意



● 下記の場所で使用しないでください。

感電や火傷、視力障害等の原因となります。

○異常な室温(低すぎる・高すぎる)の場所
○湿度の高い場所 ○水に濡れる可能性のある場所
○暗い場所 ○周囲に他の人やペットがいる場所
○引火性の気体・液体(アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど)の近く
○強い電波や磁気のある場所
○油煙、湯気が直接あたる場所
○発熱器具の近くなど高温になる場所

● 下記の場所で保管しないでください。

故障の原因となります。

○ホコリの多い場所・直射日光の当たる場所
○異常な室温(低すぎる・高すぎる)の場所
○湿度の高い場所 ○水に濡れる可能性のある場所
○強い電波や磁気のある場所
○油煙、湯気が直接あたる場所
○発熱器具の近くなど高温になる場所 ○温度変化の激しい場所

注意

- **使用中は本体が落下しないよう、しっかりと持つ。**

落下により怪我や、本体の故障の原因となります。

- **通気／放熱口から漏れる光も直視しないよう注意する。**

通気／放熱口から光が漏れることがあります。光が目に入らないよう、ご注意ください。

- **照射部についた汚れ、抜け毛などは取り除く。**

火傷の原因となります。また、正常な使用ができない原因となります。

- **使用後は毎回必ずお手入れを行う。**

お肌に触れる部分でもあるため、清潔さを保つようご注意ください。お手入れは、電源をOFFにし、ACアダプタを取り外した状態で行ってください。

- **長期間使用しなかった場合、使用前に点検を行う。**

外観に破損がないか、正常に動作するかご確認のうえ使用してください。

- **使用中、本体やACアダプタが高温になった場合は一時使用を中断する。**

使用中に本体が熱くなることがありますが、故障ではありません。本体やACアダプタが高温になった場合は使用を一時的に終了し、クールダウンのために時間をおいてから再度使用してください。





- **初めて使用する際はプレテストを行い、レベル1から照射を行う。**

初めから強いレベルで照射を行うと皮膚トラブルの原因となります。

- **結露が生じた場合はしばらく放置し、結露が解消してから使用する。**

本体を温度差のある環境に移動した場合、結露が生じる場合があります。そのまま使用すると感電や故障の原因となりますので、本体温度と室温が同じになるまで室内に放置し、使用しないでください。

- **使用後は適切にお肌のお手入れを行う。**


化粧水や乳液などで保湿を行い、ほてりや赤みが出る場合には必要に応じて、アイシングなどを行ってください。脱毛ケアの期間中はお肌のお手入れにも十分ご注意ください。

製品仕様

電 源	AC 100V~240V／50Hz-60Hz 1.5A
消 費 電 力	48W(12V／4A)
本 体 サ イ ズ	186.8×59.7×42mm
本 体 重 量	約300g
使 用 環 境	温度：5～30℃／湿度：25～75%RH
保 管 環 境	温度：0～50℃／湿度：25～75%RH

同梱品の確認

万一不足・破損している場合は販売元、またはお客様
ご相談窓口までご連絡ください。

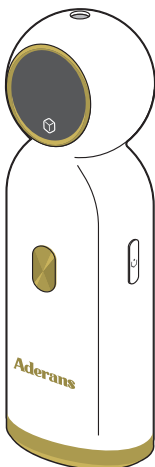


●本体×1




●サングラス×1

※折りたたみ式

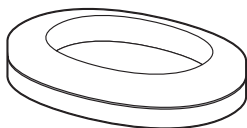


●台座×1

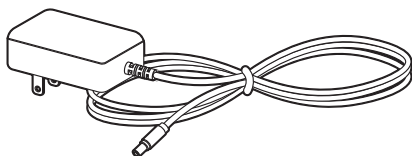


●ACアダプタ×1

●取扱説明書 兼 保証書（本書）×1

各部名称

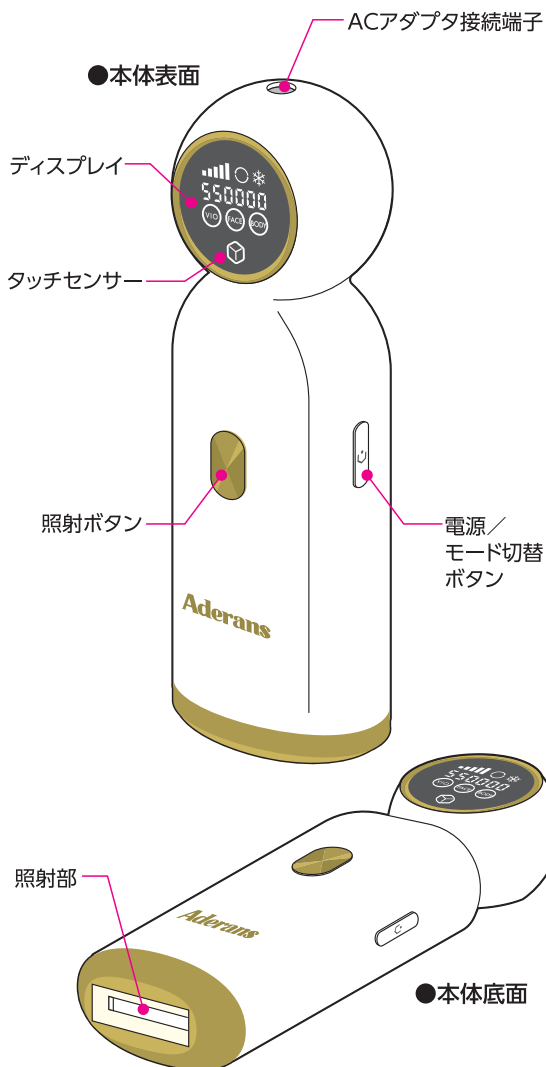


●ディスプレイ部

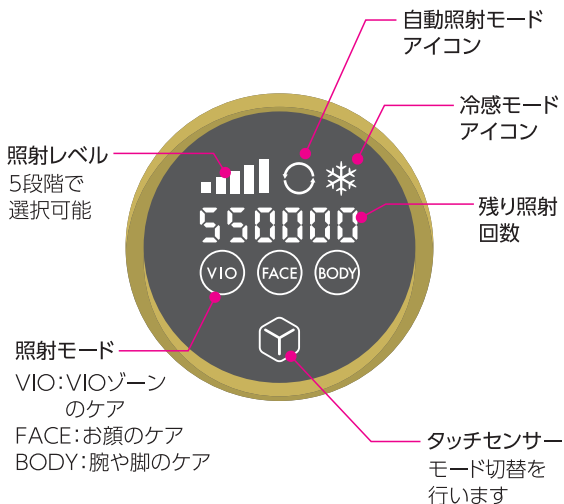

冷感モードについて

本製品は光を照射する際、同時にお肌を冷却する「冷感モード」を搭載しています。これにより、お肌の熱さや痛みを軽減できます。冷感モードは常時ONになっています。(ON/OFF切替はできません)

●本体背面

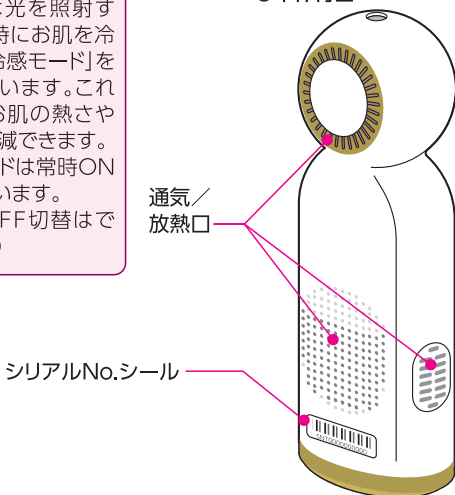

ご使用前に

プレテスト

使用前にプレテストを行い、使用に問題がないかご確認ください。(テストの前に「使い方」の項目と「安全上のご注意」の項目を必ずお読みください。)

下記の手順でプレテストを行います。

- ①目立たない部位(腕や脚などで、洋服で隠れる部位)でプレテストを行います。
- ②プレテストを行う部位のムダ毛を、シェーバーなどで除毛してください。
- ③電源をONにし、タッチセンサーを操作して「BODY」モードにします。照射レベルが「1」になっていることを確認してください。
- ④室内を明るくし、付属のサングラスをかけます。または、光を直視しないでください。
また、周囲に他の人がいない環境で行ってください。
- ⑤プレテストを行う部位に本体を直角に当て、照射部を完全にお肌に密着させます。その状態で、照射ボタンを押し、1回照射してください。
- ⑥24時間経過を観察します。赤みやほてり、痛みなどお肌に異常がないか確認してください。
異常がある場合は使用を中止し、皮膚科医に相談してください。
異常が見られない場合は通常の使用を開始してください。

使用を控える場合

3ページの表をチェックし、お肌の色とムダ毛の色が✕に該当する場合は本製品の使用を控えてください。
また、下記のような場合は使用を控えてください。

●日焼けをした場合

お肌の赤みやほてりが治まるまで、数日～1週間程度は使用を控えてください。

●お薬を服用したり、医療機関で点滴、注射（予防接種など）を受けた場合

光に対してお肌が過敏になったり、免疫力の低下により皮膚トラブルの原因になる場合があります。
1週間程度、時間をあけてから使用してください。

●毛抜や脱毛ワックスなどでムダ毛処理をした場合

本製品でのムダ毛ケアの効果が低くなりますので、
1週間程度時間をあけてから使用してください。

●制汗剤や日焼け止めを塗布した場合

使用した当日は使用を避けてください。

●飲酒や激しい運動、入浴、サウナ等の前後

血行が良くなった状態で本製品を使用すると、使用後にお肌の赤みなど、トラブルの原因となります。使用前後にこれらの行為は控えてください。

●その他皮膚トラブルがある場合、体調がすぐれない場合

「安全上のご注意」にも必ずお守りいただきたい注意事項を記載しております。ご使用前に必ずお読みください。

使用を避ける部位

光美容器の光は、メラニン色素に反応し熱を加えます。お肌の上に色の濃い部分(シミ・ほくろなど)があると熱が集中し、火傷や皮膚トラブルの原因となります。

下記の場所には照射しないでください。

- シミ・ほくろなど黒色の部分
- 入れ墨のある部分
- メイクなどが残っている部分
事前にメイクは落としてください。
- 虫刺され・湿疹・傷のある部分
- ピアスなどアクセサリーのある部分
外せるものは必ず外してください。
- 目およびその周辺
- 口腔内など粘膜の部位


「安全上のご注意」に必ずお守りいただきたい注意事項を記載しております。ご使用前に必ずお読みください。

使い方

基本的な使い方

1 ケアしたい部位のムダ毛を短く除毛してください。

ムダ毛が長い状態のまま照射を行うと、火傷の原因となります。必ず短く除毛してください。また、ムダ毛を除毛した後に化粧水などはつけないでください。

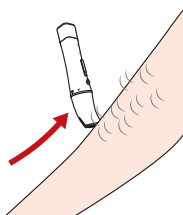


※シェーバーの使用をおすすめいたします。カミソリを使用する場合は、肌荒れにご注意ください。

※ボディピアスやアクセサリーなどは必ず外してください。

※日焼け止め、ファンデーションなどをつけている場合は洗い流し、水分をよく拭き取ってください。


2 本体の照射部をチェックし、汚れがある場合は拭き取ります。

照射部に汚れがあると、火傷や皮膚トラブルの原因となります。綿棒などで拭き取ってください。

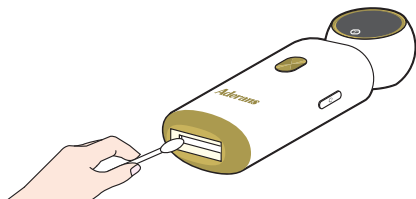


3

ACアダプタを本体に接続し、
電源をONにします。

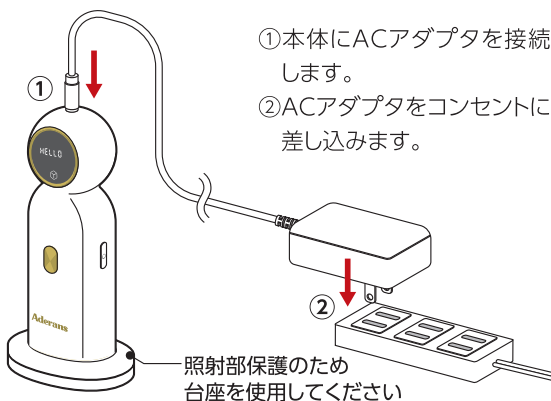

電源接続後、側面の電源ボタンを長
押し（約1.5秒）します。画面に
「HELLO」と表示され、スタンバイ状
態になります。

電源OFFの手順は25ページを参照
してください。

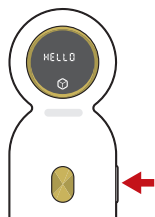

4

眼の保護のため、サングラスをかけます。
または、光を直視しないように照射します。

サングラスをかけた状態でも、照
射中の光を直視しないようご注意
ください。

また、お部屋は明るくし、周
囲に人のいない状態で行っ
てください。

特にお子さまやペットがいる
場合は近づかせないよう、ご
注意ください。




腕・脚への使い方(BODYモード)

1 タッチセンサーを操作し、「BODY」モードにします。

タッチセンサーを指で触れ、「BODYモード」アイコンを表示させます。(点滅します)

本体側面の電源ボタンを押し、照射レベル(1～5)を選択します。

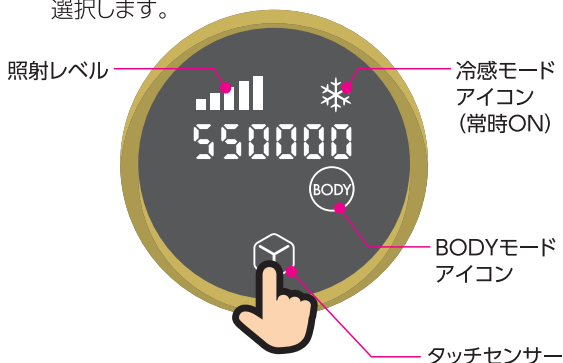


※はじめて使用する場合は照射レベルを1にして、痛みがないか確認しながら照射を行ってください。


2 照射したい部位に、本体を垂直にあて、照射部をお肌に密着させます。

照射部とお肌に隙間があると照射ボタンを押しても照射されません。

通気／放熱口をふさがないように持ってください。
本体に熱がこもり故障の原因となります。

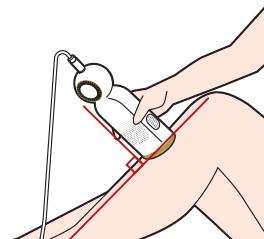


※お肌に密着し、照射可能になるとBODYモードアイコンが点滅から点灯に変わります。

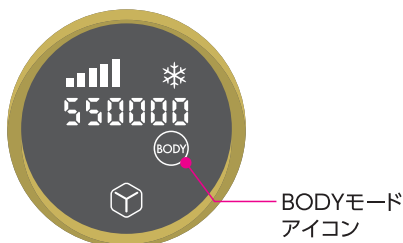

点滅状態の時は、照射ボタンを押しても照射されません。

3 照射ボタンを押して 照射を行います。

照射ボタンを押すと、一回照射が行われます。
照射の光が漏れないよう、照射部がお肌に密着していることを確認してから照射ボタンを押してください

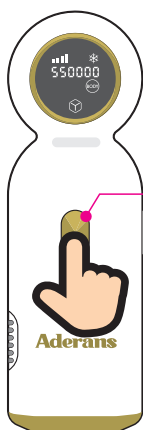

少しずつ照射位置をずらしながら、照射を行ってください。




●自動照射モード

照射ボタンを長押ししてから離すと、自動照射モードになります。ディスプレイに○アイコンが表示されます。

自動照射モードでは、一定間隔で自動で照射を行います。(照射部をお肌から離れた状態では照射は行われません。)

照射ボタンを押すと自動照射モードは解除されます。

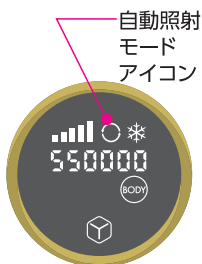

※自動照射モードでは肌に触れると自動的に照射されます。指などで触れた場合でも照射されてしまうため、光が目に入らないよう、十分ご注意ください。

続けて別の部位をケアするには、**必ずモード切替と照射レベルの調整**をします。(22、26、27ページ参照)

操作がない状態で5分経過すると自動的にシャットダウンされます

4


ケアが終わったら 電源をOFF(シャットダウン)にします。

電源をOFFにするには、本体側面の電源ボタンを長押し(約1.5秒)します。

電源はすぐにOFFにはなりません。

ディスプレイにカウントダウンが表示され、10秒後に自動的にシャットダウンされます。

※カウントダウン中はACアダプタを外さないでください。
故障の原因となります。

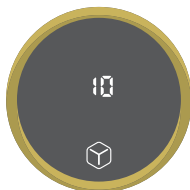


**使用後はお肌の保湿をし、濡れタオルなどで
アイシングを行ってください。**

お顔への使い方（FACEモード）

20ページ①～21ページ④までの手順で準備を行ってください。

タッチセンサーを指で触れ、「FACEモード」アイコンを表示させます。

本体側面の電源ボタンを押し、照射レベル（1～5）を選択します。

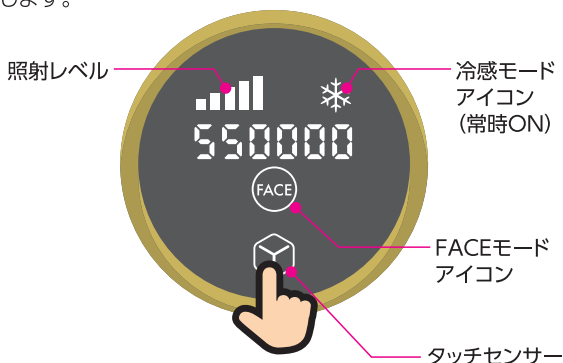

お顔への使用では、下記の点にご注意ください。

- 光が目に入りやすいため、照射中はサングラスをかけるか、光を直視しないでください。
- 頬などへ使用する場合、髪の毛へ照射しないでください。

髪の毛が焦げたり、火傷などの原因となります。

- 眉間、おでこ、眉毛など目の周辺には使用しないでください。

鼻の下、あご、頬などの部位へご使用ください。


- 顎付近は照射部が肌に密着せず、光が漏れることがあるため、光が目に入らないようご注意ください。

VIOゾーンへの使い方（VIOモード）

20ページ①～21ページ④までの手順で準備を行ってください。


タッチセンサーを指で触れ、「VIOモード」アイコンを表示させます。

本体側面の電源ボタンを押し、照射レベル（1～5）を選択します。

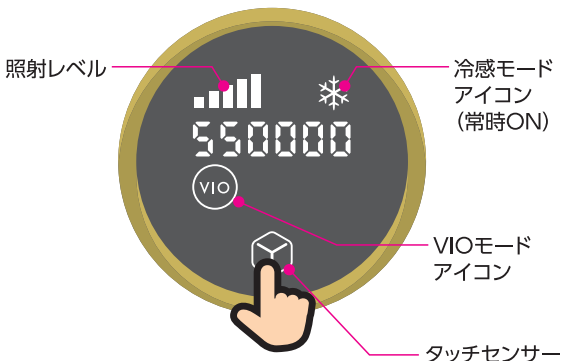

●「V」ゾーンへの照射

お肌を伸ばしながら照射を行ってください。

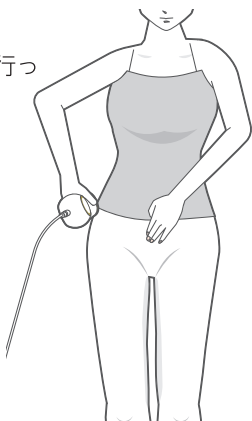

●「I」、「O」ゾーンへの照射

床に鏡を置き、その上に片膝を立てて足を広げながら照射を行ってください。

照射する部分を鏡で確認した後に鏡を直視せずに照射してください。

粘膜に直接照射しないように照射してください。



●照射前に毛の剃り残しがないか確認してください。

●男性器などIラインよりも内側への照射はしないでください。

●VIOゾーンへの照射時は必ず、お肌を清潔な状態にして行ってください。

お肌に汚れがある場合はウェットティッシュなどで照射箇所を拭いてください。

●お肌が濡れた状態では照射を行わないでください。

必ず、お肌が乾いた状態で照射を行ってください。

●VIOゾーンへの照射時は必ず、照射面をウェットティッシュなどで拭いて、水気を取るために最後に乾拭きしてください。

使用後のお肌のお手入れ

使用後は化粧水・乳液などでお肌のケアを行ってください。また、必要に応じてアイシングなどを行ってください。

使用後はお肌に軽度の赤みや熱感、刺激を感じる場合がありますが、通常はすぐに消えます。

使用後は下記の点にご注意ください。

- **使用後24時間はケアした部位の極度な日焼けを避けてください。**
- **使用後当日は長時間の入浴、サウナ、激しい運動、飲酒などは避けてください。**
- **ケアした部位のお肌に強い刺激を与えないようにしてください。**
- **使用後数時間は、ケアした部位に香水やメイクアップ化粧品を使用しないでください。
(保湿のための化粧水・乳液などは除く)**

「安全上のご注意」に必ずお守りいただきたい注意事項を記載しております。ご使用前に必ずお読みください。

使用頻度について



上の表を参考に、実際の毛やお肌の状態に合わせて使用頻度を決めてください。

- **効果が感じられるまでの期間は個人差があります。**
- **毎日使用したり、1日の内に同じ部位へ複数回使用しないでください。**

使用頻度を高めても効果が高くなることはありません。お肌への負担になりますので、適切な回数での使用を心がけてください。

本体のお手入れ・保管について

使用後はお手入れを行ってください。

お手入れを行う際は電源をオフにし、ACアダプタを外してから行ってください(25ページ参照)。

本体や照射口の汚れは乾いた清潔な布で拭き取ってください。水洗いはできません。また、アルコール・ベンジンなども使用しないでください。故障の原因となります。

本体・ACアダプタは高温多湿な場所を避け、埃の少ない場所に保管してください。(保管環境温度=0~50℃)

こんなときは

Q: 電源ボタンを押しても電源がONにならない。

A: ACアダプタが正常に接続されているか確認してください。

Q: 照射ボタンを押しても照射されない

A: 照射口が皮膚と完全に密着しているか確認してください。(22ページ参照)

A: 本体が過熱していないか確認してください。過熱している場合は、本体が冷却するまでしばらく時間をおき、再度使用してください。

Q:使用中に本体が熱くなる

A: 長時間使用した場合、本体が過熱する場合があります。電源をOFF (25ページ参照)にし、本体の温度が十分に下がるまで時間を置いてください。

Q: 使用後にお肌が赤くなる

A: 使用後、お肌が赤みを帯びる場合がありますが、通常はしばらくすると元に戻ります。濡れタオルなどでアイシングを行ってください。

Q:使用中に異臭がする

A: 使用前に毛を剃らなかった場合、お肌表面からでている毛に熱が集中し、焦げる場合があります。使用前にはカミソリなどでケアしたい部位の毛を剃ってください。

A: 照射部に汚れが付着している場合、使用中に異臭がする場合があります。使用前に汚れをふき取ってください。

A: 照射レベルが強すぎる場合があります。照射レベルを下げて使用してください。

Q: 数ヶ月使用しても効果が感じられない

A: 照射レベルを調整し、各モードの範囲内で一段階強めにして照射してください。

A: 毛の色が金／赤／白色などの薄い場合や、産毛などの細い毛には効果が望めません。(3ページ参照)

A: 使用周期(前回使用からの期間)が長過ぎる可能性があります。30ページを参考に、使用頻度を見直してください。

A: 効果が感じられるまでの期間は個人差がありますが、8週から20週以上かかる場合があります。

下記の場合、ただちに使用を中止し、販売元、またはお客様ご相談窓口までご相談ください。

- 本体が異常に熱い
- 異常な音、振動、コゲ臭いにおいがする
- 本体やACアダプタが破損・変形している

お客様ご相談窓口

*本製品についてご不明な点がございましたら
お気軽にご相談ください。

アデランスお客様サービス室



0120-03-9696

受付：月曜～金曜(祝日を除く)10:00～18:30

土日祝日9:00～17:30 (年中無休) ※年末年始を除く

- 使い方がわからない
- 本機器が動かない
- 本製品を修理したい 等

無料保証規定

1.取扱説明書の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理をさせていただきます。

- 無料修理をご依頼になる場合には保証書と納品書などの購入がわかる資料を添えていただき販売元、またはお客様ご相談窓口までお申し付けください。

※納品書など、購入が証明できる書類は必ず保管してください。

2.ご転居の場合の修理ご依頼先などは、販売元、またはお客様ご相談窓口までご相談ください。

3.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- お買い上げ後の使用場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
- 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、凍結などによる故障及び損傷
- 車両、船舶などに放置された場合に生ずる故障及び損傷
- 保証書の写しが添付されていない場合
- 製品を正規店または正規代理店以外から購入・入手された場合

4.保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

※この無料保証書規定は、保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するための規定です。

保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、販売元、またはお客様ご相談窓口までにお問い合わせください。

5.本製品は日本国内専用品です。

この無料保証規定は日本国内においてのみ有効です。

保証書

※修理をご依頼の際は、必ず保証書のコピーをとり、
お手元に保管してください。

家庭用

商 品 名	DoRAISE アイスクリーン PRO
シリアルNo. ※本体のシリアルNo. を転記してください。	
保 証 期 間	お買い上げ日から 本体のみ 1年間 (その他付属品は対象外)
お買い上げ販売 店舗印、または レシート貼り付け	
お 買 い 上 げ 日	年 月 日
お 客 様 名	様
ご 住 所	〒 -
電 話 番 号	() -

保証書は取扱説明書の記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中に故障が発生した場合は、必要な事項を記入し、コピーをお手元に保管の上、販売元、またはお客様ご相談窓口まで修理をご依頼ください。

※シリアルNo.、お買い上げご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合は、本保証書は有効とはなりませんので、記入漏れの無いことを必ずご確認ください。

※本体のシリアルNo.シールを剥がされた場合は、
保証対象外となりますのでご注意ください。



AA1

発売元 株式会社 **アデランス**
東京都品川区東品川4-12-6

MADE IN CHINA