

## ご利用規約

1. このサービスは、当社が発売したすべての機種の取扱説明書を提供しているわけではございません。商品には取扱説明書を補足するために「操作ガイド」など取扱説明書以外の印刷物が同梱されている場合がありますが、このサービスでは、それらの印刷物を含んでおりません。お探しの取扱説明書が見つからない場合は、ご購入店、お近くの販売店、または最寄りの弊社サービス窓口を通じて、お問い合わせいただきますようお願いいたします。
2. 取扱説明書の内容は、商品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。このサービスで提供している取扱説明書の内容は、商品本体に同梱されている取扱説明書の内容と異なる場合があります。
3. 安全上のご注意は、取扱説明書が制作された時点での法令や業界における基準に応じた内容になっています。
4. 公開している取扱説明書は、商品をご購入いただいたお客様がご覧になることを想定しています。商品を購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合がありますことをご了承ください。
5. 取扱説明書の著作権は株式会社アデランスに帰属しております。個人的な利用を目的とする印刷・保存等、その他著作権法で認められる場合を除き、取扱説明書を事前の許諾なしに、複製、改変、第三者への共有、送信することは禁止されています。
6. このサービスの利用、あるいは利用できなかったことにより、万一、損害が生じても、当社は、当社に故意または重大な過失が認められる場合を除き、一切その責任を負いません。
7. このサービスは、予告なく中止または内容を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

# Aderans

ヘアリプロ スカルプ LED EX

取扱説明書

保証書付



## HairRepro SCALP LED EX



形名

エイ ディー エイチアール

# AD-HR02



プラズマクラスターロゴおよび  
プラズマクラスター、Plasmacluster は、  
シャープ株式会社の登録商標です。

**本製品は防水仕様ではありません。**

業務用として使用しないでください。

お買いあげいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見る事ができる所に必ず保管してください。

# もくじ

ページ

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 特 長 .....         | 3   |
| 安全上のご注意 .....     | 4   |
| 各部のなまえ .....      | 8   |
| 充電のしかた .....      | 9   |
| 使いかた .....        | 11  |
| スカルプエステ .....     | 12  |
| お手入れ .....        | 14  |
| こんなときは? .....     | 15  |
| 保証とアフターサービス ..... | 16  |
| 仕 様 .....         | 18  |
| MEMO .....        | 19  |
| 保証書 .....         | 裏表紙 |

# 特長



## 「赤色LED搭載」

波長630nmの赤色LEDを吹出口に2個取り付け、ダブルかつさにより、頭皮に光を届けます。



## 「プラズマクラスター」技術とは？

プラスとマイナスのイオンをプラズマ放電により作り出すシャープの独自技術です。

プラスとマイナスのイオンによる「静電気抑制効果」や、「保湿効果」があります。


自然界に存在するイオンと同じであり、作用メカニズムも解明されており、安全性も確認済みです。

赤色LED × プラズマクラスター 共同開発

## ヘッドスパニストの手の動きに学んだ、独自のダブルかつさ形状

ほどよい弾力としなり感で、頭皮全体にアプローチします。ひんやりとした感触を楽しめる、サージカルステンレスボール指と支点指の組み合わせで、「プラズマクラスターイオン × 赤色LEDによる光」をたっぷりと頭皮に届け、心地よく頭皮を刺激します。


スカルプエステのしかたについて、詳しくは (12, 13 ページ) をご確認ください。

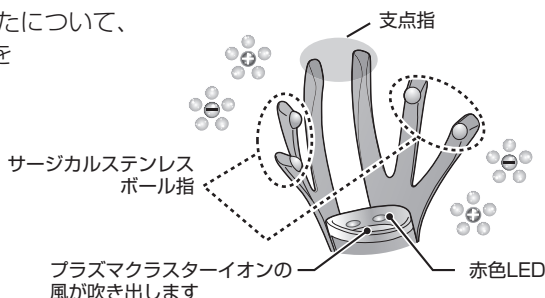

# 安全上のご注意(1) 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を、次のように区分して説明しています。

|                                                                                             |                               |                                                                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  <b>危険</b> | 「死亡または重症を負うおそれが高い」内容。         |  <b>警告</b> | 「死亡または重症を負うおそれがある」内容。 |
|  <b>注意</b> | 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。 |                                                                                             |                       |



## 危険

感電や火災などの事故や大けがを防ぐために

本製品はニッケル水素充電電池を使用しています



- 本体に釘を刺す、ハンマーで叩く、踏みつけるなど、強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない  
(発熱・発煙・破裂・発火・液漏れの原因)



- バッテリー内部の液体が漏れて目に入ったときは、こすらずに、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗ったあと、ただちに医師の診察を受ける  
(目に障害を与える原因)



## 警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために



分解禁止

- 改造はしない。修理技術者以外は、分解・修理をしない  
(火災・感電・けがの原因)  
修理はお買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。 裏表紙



水場使用禁止

- 水に浸けたり、水をかけたりしない
- 浴室や湿気の多い所(水のかかる場所)で使用・保管をしない  
(感電・ショート・火災・故障の原因)



- 充電中や充電完了直後は、本体のコネクター差込口・ACアダプターのプラグに触れない  
(やけどの原因)
- 針金やピンなどの金属で、コネクター差込口に触れたり差し込んだりしない  
(感電やショート・発火の原因)

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。



## 警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

### ACアダプターや充電ケーブルは



- 交流100-240V以外の電圧で使用しない
- タコ足配線をしない  
(火災・感電の原因)
- ACアダプターや充電ケーブルを破損させない  
・無理に曲げない・引っ張らない・ねじらない・束ねない  
・はさみ込まない・加工しない  
・傷つけない・重いものを載せない  
(ケーブルが傷み、火災・感電の原因)
- ゆるんだコンセントは使わない
- ぬれた手で抜き差ししない  
(感電やショート・発火・けがの原因)
- ACアダプターのプラグに針金やピンなどの金属類を絶対に接触させない  
(発火・破損の原因)



- 必ず付属のACアダプター・充電ケーブルを使用する  
(火災・感電・故障の原因)
- ACアダプターのプラグのほこりは定期的に取り  
・プラグを抜き、乾いた布で拭く  
(プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
- ACアダプターのプラグは根元まで確実に差し込む  
(不完全な差し込みは、火災・感電・ショートの原因)
- ACアダプターは風通しの良い状態で使用する  
・布やふとんでおおったり、包んだりしない  
(熱がこもり、火災・やけど・故障の原因)

# 安全上のご注意(2) 必ずお守りください



## 警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

### ご使用時・保管に関して



- 充電しながら使用しない
- 充電しながら、お手入れや点検をしない  
(ケーブルが傷み・火災・感電・けがの原因)
- 引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・スプレー・ガスなど)の近くで使用しない (爆発・火災の原因)
- 赤色LED点灯中に光源をのぞいたり直視をしない  
(目に障害を与える原因)



- バッテリー内部の液体が漏れて皮膚や衣類に付着したときは、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗う  
(皮膚に障害を与える原因)
- 次の異常・故障時にはただちに使用を中止し、すぐに販売店へ点検・修理を依頼する
  - ・ スイッチを入れても、運転しないことがある。
  - ・ ACアダプターや充電ケーブルを動かすと、本体の充電ランプがついたり消えたりする。 ・ 運転中に止まる。
  - ・ 運転中に異常な音がする。 ・ 本体やACアダプターが変形したり異常に熱い。 ・ こげくさいにおいがする。  
(火災・感電・やけどの原因)

### ダブルカッサのご使用について



- 次のような方や部位には使用しない
  - ・ 妊娠中の方、生理中の方  
(ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因)
  - ・ 傷や湿疹、はれもの、過度の日焼けなど頭皮に異常がある方
  - ・ 体調のすぐれない方 ・ お酒を飲まれている方
  - ・ 疲労の激しい方 ・ 頭部周辺で手術をした部位
  - ・ 貴金属を身に着けてアレルギー反応が出たことのある方
- 次のような使いかたはしない
  - ・ 目的以外に使用しない ・ 同じ箇所当て続けたり
  - ・ 頭皮に強く押しあてたり、速く動かしたりしない
- 決められた使用時間以上は使用しない  
(頭皮や肌、身体トラブルの原因)



- 次のような方は必ず医師と相談のうえ使用する
  - ・ アトピー性皮膚炎、湿疹など頭皮に皮膚疾患のある方
  - ・ 敏感肌の方 ・ 麻痺および知覚障害のある方 ・ アレルギー体質の方
  - ・ 出血性疾患、血友病疾患など血液異常の方
  - ・ 内出血を起こしやすい方 ・ 薬を服用中の方
- 頭皮や身体の痛み、異常を感じたらすぐに使用を中止し、専門医等へ相談する  
(頭皮や肌、身体トラブルの原因)



## 警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

### お手入れや点検時は



- 運転を停止する
- ACアダプターをコンセントから抜く  
(感電・けがの原因)

### ダブルかっさの金属ボールについて

本製品の金属ボールはサージカルステンレス製です。貴金属を身につけてアレルギー反応が出たことがある方は使用しないでください。貴金属以外の金属でアレルギー反応が出たことがある方は、使用に関して医師に相談してください。医師の使用許可が出た場合は、目立たないところで試していただき、異常がないことを確認してから使用してください。



## 注意

感電や火災など事故やけがを防ぐために

### ご使用時に関して



- 吹出口をふさがない
- 吸込口をふさいで長時間運転しない  
(過熱による本体の変形・発火・火災の原因)
- 吸込口・吹出口に金属類・ピンなどを入れない  
(感電・故障の原因)

### ACアダプターや充電ケーブルは



- ACアダプターを抜くときは、充電ケーブルを引っ張らず、必ずACアダプター本体を持って抜く  
(感電・ショート・発火の原因)

プラグを抜く




- 充電は必ず5℃～35℃の環境でおこなう  
(発熱・発煙・破裂・発火の原因や、正しく充電できなかつたりバッテリー劣化の原因)
- 湿気やほこりが少ない場所で使用・保管する  
(発熱・発火・感電の原因)
- 長期間使わないときは、ACアダプターをコンセントから抜く  
(火災・感電・故障の原因)
- 乳幼児の手の届かないところに保管する  
(けがの原因)



# 各部のなまえ

## 本体

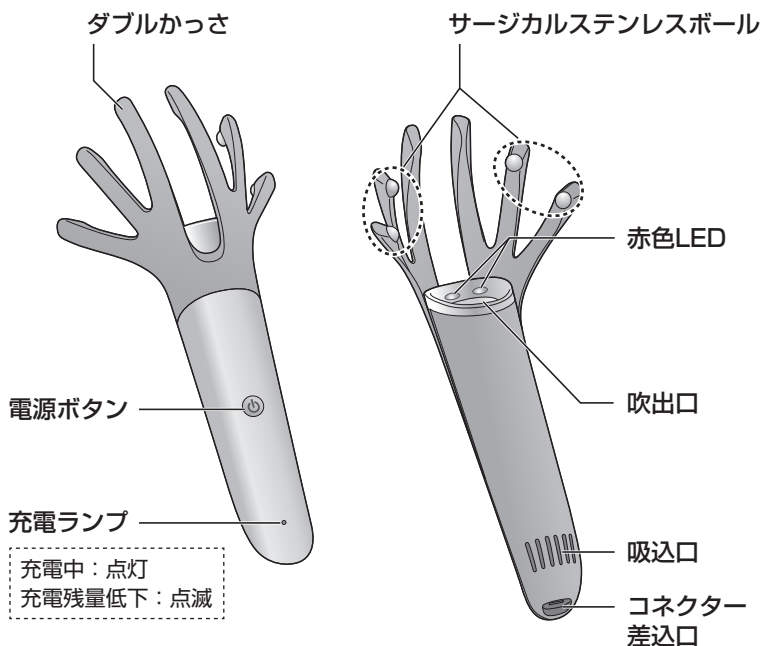

### お願い

- 充電ケーブルを接続するときは、形や向き(表裏)を確認してから、コネクターを水平に差し込んでください。また、抜くときも水平に抜いてください。  
無理に差し込んだり抜いたりすると、充電ケーブルのコネクターや本体のコネクター差込口が破損したり、故障の原因になります。

## 付属品

- ACアダプター
- 充電ケーブル

- 取扱説明書(保証書付)

当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.


# 充電のしかた

## バッテリー(電池)を充電する

お買い上げ時にはバッテリーが十分に充電されていないので、ご使用前には必ず、本体の充電ランプが消えるまで充電してください。

① ACアダプターに充電ケーブルを接続して、コンセントに差し込む

② 充電ケーブルのコネクターを、本体のコネクター差込口に水平に差し込んで充電する

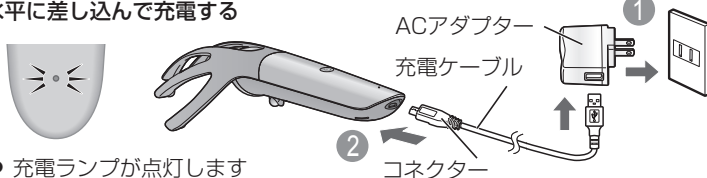

● 充電ランプが点灯します

● 約2時間30分で満充電になります。

満充電になると充電ランプが消灯し、自動で充電が終了します。

### 充電できない場合は次のことをご確認ください

- ACアダプターがコンセントから抜けていませんか。
- 充電ケーブルのコネクターが本体のコネクター差込口から抜けていませんか。

### 充電について

- 次の場合は、充電時間が長くなることがあります。
  - 長期間使用していないとき
  - 低温(約5℃以下)や高温(約35℃以上)の環境で充電したとき  
(室温が5℃～35℃の環境で充電してください)

### 運転時間について

- 1回の充電で約30分間使用可能<sup>※</sup>です。自動電源OFF機能(15分後)  
※満充電・電池初期/20℃。使用環境・使用状態により異なります。
- バッテリーは繰り返し使用することで、運転時間が徐々に短くなります。満充電にしても運転時間が極端に短いときは、バッテリーのリフレッシュ (10ページ) をしてください。

#### お知らせ

- 充電中に本体やACアダプターが熱くなりますが、異常ではありません。

#### ご注意

- 充電中や充電完了直後は、本体のコネクター差込口やACアダプターのプラグが熱くなりますので、触れないでください。  
(やけどの原因)

# 充電のしかた(つづき)

## バッテリー(電池)をリフレッシュする

### バッテリーのリフレッシュについて


初めてご使用になるときや、長時間使っていない場合は、充電してもすぐに動かなくなるなど、正しく充電できない場合があります。そのときは、以下の方法でバッテリーをリフレッシュしてください。

1

#### 通常通り満量まで充電する

- バッテリーを充電する

9 ページ

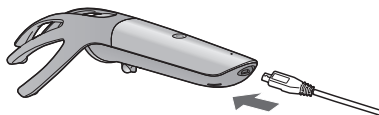

2

コネクターを抜き、電源ボタンを8秒以上長押しすると、赤色LEDと充電ランプが1秒間に約1回同時に点滅し、リフレッシュ開始 (最長約30分)



3

#### 赤色LED消灯後に運転が停止し、リフレッシュ完了

- ご使用になる場合は、再度充電が必要です。

- リフレッシュ運転を中断した場合は、リフレッシュは完了しません。もう一度初めからおこなってください。
- リフレッシュ運転中は、使用を目的とした動作をしません。
- 何度リフレッシュしても運転時間が短い場合は、電池の寿命時期になっている可能性があります。販売店にご相談ください。

### バッテリーを長持ちさせるコツ

使用時間にかかわらず、使用後は必ず充電してください。長期間※使わないときは、必ずバッテリーを満充電にし、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

※1カ月以上を目安としています

- 長期間使用しなかった後で次に使用するときには自然放電していますので、再度充電してからお使いください。
- 満充電にしても運転時間が極端に短いときは、バッテリーをリフレッシュしてください。
- バッテリーを使いきった状態のまま放置すると、バッテリーの劣化につながります。

# 使いかた

## 警告



浴室や湿気の多い所(水のかかる場所)で  
使用・保管をしない

水場使用禁止

【感電・ショート・火災・故障の原因】

充電のしかた／使いかた

## 基本的な使いかた

本製品は防水ではありません。

風呂場などぬれた場所やぬれるおそれのある場所、高温多湿の場所での使用は、絶対にしないでください。

髪の毛がぬれた状態で使用しないでください。

充電しながら使用しないでください。

1

電源ボタンを2秒長押しして電源を入れる  
赤色LEDが点灯します



2

1日1回、5分を目安にスカルプエステをしてください



スカルプエステのしかたは (12, 13 ページ)

3

電源ボタンを2秒長押しして電源を切る



# スカルプエステ


1日1回、5分を目安にスカルプエステをしてください

1箇所当て続けず、使用場所を変えながら、心地よい強さでおこなってください。  
長時間の使用や、強い力加減での使用など、過度なスカルプエステは頭皮を傷める原因になりますのでお控えください。

髪の毛がぬれた状態で使用しないでください。  
(故障の原因となります)

## 心地よさのポイント！ラウンドアプローチ

本体を前後に動かすと、ダブルかつさの先端が「開いて閉じる動作」となって、ラウンド状の軌跡(右図)を生み出し、頭皮をつまむように動かします。

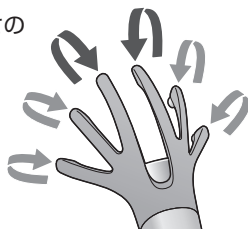

## ～スカルプエステ 3つのステップ～

### 1 ストレッチ(頭部全体～生え際)



- 髪の毛の生え際にかつさの先端を当て、頭頂部に向かってサージカルステンレスボールを滑らせる。
- 髪の毛の生え際にかつさの先端を当て、左右に2～3回動かした後、頭頂部に向かって滑らせる。
- 上記を繰り返して、頭部全体を刺激する。

#### ポイント


- 頭皮を動かすように意識する
- ひたい周辺だけでなく、後頭部の生え際も同様におこなう

## 2 バウンドプッシュ(頭部全体)

- 髪の生え際から頭頂部に向かって、軽くバウンドさせながら動かす。

ポイント

・頭部全体を心地よく刺激する

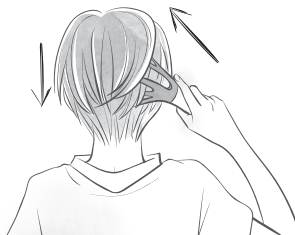

- 首の付け根の生え際から、頭頂部に向かって本体をバウンドさせながら、動かす。
- 頭頂部から後頭部に向かって滑らせる。

## 3 ラウンドアプローチ(頭頂部・側頭部)

- 耳の上あたりにかっさの先端を当て、本体を押した後、引くように動かす。

ポイント

・ラウンド状に動く先端で頭皮をつかみ、心地よく刺激する



本体を自由に動かしながら、頭皮の気になるところを心地よく刺激してください。



本体を逆手に持って動かす方法もおすすめてです。

# お手入れ

## 警告



- ・電源を切り運転を停止する
- ・充電しながらおこなわない

【感電・けがの原因】

## 本体

お手入れ時期：汚れたら

### 表面を柔らかい布で拭く

整髪剤などの汚れは、異臭や変色などの原因になります。


ダブルかっさの汚れがひどいときは、  
水を含ませて固く絞った布で  
拭き取ってください。



汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませ、固く絞った布で  
拭き取ってください。その後、水を含ませて固くしぼった布で  
拭き取ってください。

#### ご注意

- 本製品は防水仕様ではありません。  
水洗いはしないでください。  
また、吹出口には絶対に水が  
入らないようご注意ください。  
(故障の原因)

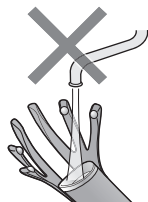

## 吸込口

お手入れ時期：1カ月に1回以上

### 市販のブラシやティッシュで、ほこりを取り除く



## 警告



吹出口・吸込口から、ヘアピンや針金などの異物を  
入れない【火災・感電・異常動作の原因】

本体のお手入れに次のものは使わないでください。

(表面の変色・ひびわれや、内部(精密部)に液が浸透すると故障の原因)



シンナー  
ベンジン  
アルコール



オープンクリーナー  
クレンザー  
漂白剤



柑橘類  
由来成分  
含有洗剤  
(リモネンなど)



住宅・家具用  
合成洗剤  
(アルカリ性)





スプレー式洗剤  
金属タワシ

# こんなときは？

修理依頼やお問い合わせの前に  
もう一度お調べください。

お  
手  
入  
れ  
／  
こ  
ん  
な  
と  
き  
は  
？

| こんなとき                                  | お調べください                                                                          | 参照<br>ページ |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 電源ボタンを2秒長押ししても電源が入らない<br>(赤色LEDが点灯しない) | ● 充電残量が低下していませんか？<br>⇒ 充電してください。                                                 | 9         |
| 吹出口の風のおいが気になる                          | ● プラズマクラスターイオン発生時に微量のオゾンが発生するため、吹出口からにおいがすることがありますが、自然界に存在する濃度と同程度で、健康上支障はありません。 | —         |
| 吹出口から風が出ていないように感じる                     | ● 吹出口・吸込口にほこり、汚れなどが付着してふさがれていませんか？<br>⇒ ほこり・ふさいでいるものを取り除いてください。                  | 14        |

| エラー表示                                                                                                                                | お調べください                                                                                              | 参照<br>ページ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 赤色LEDと充電ランプが交互に <b>速く点滅する</b><br>(1秒間に約2回点滅)<br>     | ● 充電異常エラーです。<br><div>充電ケーブルを抜いて、ただちに使用を中止し、販売店にご相談ください。</div>                                        | —         |
| 赤色LEDと充電ランプが同時に <b>ゆっくり点滅する</b><br>(2秒間に約1回点滅)<br> | ● ファン異常エラーです。<br>⇒ 電源をOFFにして、しばらくしてから再度電源を入れてください。<br><div>繰り返しエラー表示になるときは、使用を中止し、販売店にご相談ください。</div> | —         |



# 保証とアフターサービス

## 修理を依頼されるときは 持込修理

- 1 「こんなときは？」(15ページ)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

**便利メモ** お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名

電 話 (       )       -      

お買いあげ日       年       月       日

### 保証期間中

- 修理に際しましては、保証書をご提示ください。  
保証書の規定に従って修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 技術料 | 故障した製品を正常に修復するための料金です。 |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。         |

## 補修用性能部品の保有期間

- スカルプ LED EXの補修用性能部品の、製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 要情点検



**長期で使用する場合は商品の点検を!**  
こんな症状はありませんか?

- ACアダプターやプラグが異常に熱くなる。
- 本体が変形していたり、コゲ臭いにおいがする。
- 風が出たり、出なかったりする。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止しACアダプターをコンセントから取りはずし、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後3～4年程度たちましたら、安全のため点検をおすすめします。  
点検費用については、販売店にご相談ください。

## 保証書

- 保証書は裏表紙にあります。
- 保証期間 … お買いあげの日から1年間です。  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

### ● 無料保証規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、  
無料修理をさせていただきます。  
・ 無料修理をご依頼になる場合には、商品に保証書の写しを添えていただき  
お買い上げの販売店にお申し付けください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または代理店に  
ご相談ください。
3. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
・ 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷  
・ お買い上げ後の使用場所の移動、輸送、落下等による故障および損傷  
・ モーターや電池などの有寿命部品や消耗品の自然消耗、摩耗、劣化などによる  
製品の不具合  
・ 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガス  
など)、異常電圧、指定外の使用電圧(電圧、周波数)等による故障および損傷  
・ 車両、船舶等に放置された場合に生ずる故障および損傷  
・ 保証書の写しが添付されていない場合  
・ 保証書にシリアルNo.が記載されていない場合  
・ 保証書に商品のシリアルNo.、お買い上げご購入年月日、お客様名、販売店名の  
記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合
4. 保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

※この無料保証規定は、保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を  
お約束するための規定です。

よってこの無料保証規定に従い、本保証書を発行している者(保証責任者)、および  
それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので  
保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせ  
ください。

修理メモ

# 仕 様

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| 形 名     | AD-HR02                                          |
| 電 源     | 入力：AC100-240V / 50-60Hz共用(ACアダプター)               |
| 電 源 方 式 | 充電式(ニッケル水素電池、4.8V、280mAh)                        |
| 消 費 電 力 | 充電中：約1.8W                                        |
| 最長運転時間※ | 1回の充電で約30分間                                      |
| 使用温度範囲  | 5～35℃                                            |
| 充 電 時 間 | 約2時間30分 (周囲温度・使用時間などで使用条件により<br>3時間以上かかる場合があります) |
| 質 量     | 約140g                                            |
| 付 属 品   | ACアダプター・充電ケーブル(約1m)・取扱説明書(本書)                    |

※満充電・電池初期/20℃の場合。使用環境・使用状態により異なります。  
バッテリーは繰り返し使用することで運転時間が徐々に短くなります。

- 本機はヘルツ(Hz)フリーです。転居により電源周波数が変わっても、  
部品の取り換えや調整の必要はありません。
- 本機は日本国内向け仕様です。

# MEMO


仕様／MEMO

# 保証書

※修理の際は必ずコピーを1部添えてください。

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 商品名    | ヘアリプロ スカルプ LED EX                       |
| シリアルNo |                                         |
| 保証期間   | ご購入日から 本体とACアダプターのみ 1年間<br>(その他付属品は対象外) |
| ご購入店   |                                         |
| ご購入日   | 年 月 日                                   |
| お客様名   |                                         |
| ご住所    | 〒 -                                     |
| 電話番号   | ( ) -                                   |

※機器について、ご不明な点がございましたら  
お気軽にご相談ください。

お客様ご相談窓口  
「アデランスお客様サービス室」  
 **0120-03-9696**

- ・使い方がよく分からない
- ・部品が破損し、部品を取り替えたい
- ・装置が動かない
- ・消耗品を購入したい
- ・装置を修理したい

保証書は取扱説明書の記載内容で、無償修理を行うことをお約束するものです。  
お買い上げ日から上記期間中に故障が発生した場合は、本保証書の写しを添付の上、販売店または代理店に修理をご依頼ください。

※シリアルNo.お買い上げご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合は、本保証書は有効とはなりませんので、記入漏れの無いことを必ずご確認ください。

※本体・保証書のシリアルNo.シールを剥がされた場合は、保証対象外となりますのでご注意ください。

発売元 **株式会社 アデランス**  
東京都新宿区新宿1-6-3

製造元 **シャープ株式会社**  
大阪府堺市堺区匠町1番地

保管用