

## ご利用規約

1. このサービスは、当社が発売したすべての機種の取扱説明書を提供しているわけではございません。商品には取扱説明書を補足するために「操作ガイド」など取扱説明書以外の印刷物が同梱されている場合がありますが、このサービスでは、それらの印刷物を含んでおりません。お探しの取扱説明書が見つからない場合は、ご購入店、お近くの販売店、または最寄りの弊社サービス窓口を通じて、お問い合わせいただきますようお願いいたします。
2. 取扱説明書の内容は、商品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。このサービスで提供している取扱説明書の内容は、商品本体に同梱されている取扱説明書の内容と異なる場合があります。
3. 安全上のご注意は、取扱説明書が制作された時点での法令や業界における基準に応じた内容になっています。
4. 公開している取扱説明書は、商品をご購入いただいたお客様がご覧になることを想定しています。商品を購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合がありますことをご了承ください。
5. 取扱説明書の著作権は株式会社アデランスに帰属しております。個人的な利用を目的とする印刷・保存等、その他著作権法で認められる場合を除き、取扱説明書を事前の許諾なしに、複製、改変、第三者への共有、送信することは禁止されています。
6. このサービスの利用、あるいは利用できなかったことにより、万一、損害が生じても、当社は、当社に故意または重大な過失が認められる場合を除き、一切その責任を負いません。
7. このサービスは、予告なく中止または内容を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

◎機器や消耗品についてご不明な点が  
ありましたらご相談ください。

■スカルプエアーのお客様ご相談窓口

「アデランスお客様サービス室」

☎ 0120-03-9696

- ・使い方がよくわからない。
- ・部品が破損し、部品を取り替えたい。
- ・装置が動かない。
- ・消耗品を購入したい。
- ・装置を修理したい。

発売元

株式会社 **アデランス**  
〒160-0007 東京都新宿区荒木町13番地4

製造元

 伊藤超短波株式会社  
〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-8

F0a231235-1701 A1701AN-XXXVv

スカルプエアー  
**SCALPAIR** 取扱説明書  
DK.PROFESSIONAL

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
この取扱説明書は、いつでもすぐお読みいただけるよう、大切に保管してください。



## 正しく安全にお使いいただくために

取扱説明書は本製品を安全にお使いいただくために必要です。

本製品を人に貸したり、差し上げるときには必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。ご使用前にこの「正しく安全にお使いいただくために」をよくお読みになり、正しくお使いください。

あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、下記のような絵表示をしています。危害や損害の程度を表わしていますので、内容を理解してから本文をお読みください。



**警告**

取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



**注意**

取扱いを誤ると、人が傷害を負う可能性または物的損害が想定される内容を示します。

表示例		表示例	
	は、「警告・注意」を促す内容です。 ※表示例は「感電注意」		は、行為を指示する「強制」の内容です。 ※表示例は「プラグをコンセントから抜く」
	は、してはいけない「禁止」の内容です。 ※表示例は「分解禁止」		

次のような人や部位には危険ですので、使用しないでください。



**警告**

- 発熱、急病、感染性疾患、心臓疾患などを起こしている人や血圧異常の人
- 手術を受け傷口が完治していない部位
- 12歳以下のお子様
- 頭部に傷、かぶれ、疾病のある人
- 通院中の方は医師と相談の上、使用してください。
- アレルギー体質(アトピー性皮膚炎など)の人
- 義眼やシリコンなど頭部に人工物を挿入している人
- 整形手術を受けた部位や金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位
- 酒気を帯びている人
- 血友病患者や出血性疾患を伴う病気の人
- 腹部に疾病がある人
- 緑内障の人
- 炎症を起こしている部位

## 身体に合った使い方をしてください

体調の悪化やけがなど事故の原因となります。



**注意**



頭部・腕部・足部以外の部位への使用は絶対におやめください。又、ペット等へのご使用もおやめください。



使用開始当初は、所定の設定時間(5分)で、徐々に身体を慣らしていくこと。  
★また、慣れるまでは必ず「3」以下の強弱レベルでご使用ください。



1日のご使用は最長30分とし、30分以上は絶対に使用しないでください。身体に悪影響を与える恐れがあります。



使用時間や強弱レベルなどは、年齢や体調により個人差がでます。



身体に異常を感じたり、現れた時(血圧など)は、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。



本体に音、光、熱、煙など異常を感じたときは、直ちに使用を中止すること。  
★電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。



## 使用場所や状況について

感電、火傷などの事故や物的損害、故障の原因となります。



**注意**




必ず水平で平らな場所に設置してご使用ください。



風呂場、台所、車の中、火気の近く、直射日光の当たる場所など、温度や湿度の高い場所やほこりの多い場所に置かないこと。

★本製品の寿命を縮めたり、暑さによる本体変形などで事故の原因となります。

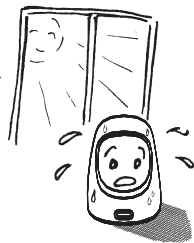

## 使用場所や状況について

感電、火傷などの事故や物的損害、故障の原因となります。

### ⚠ 注意



本体を寒い場所から暖かい場所に、いきなり移動して使用しないこと。

★本体内部で結露現象が生じる恐れがあります。この状態で使用すると表示部の誤作動や故障の原因となります。使用するときは2時間以上を目安に電源を入れてください。




他の電気製品(電気カーペット・毛布・敷布、こたつ、あひななど)との同時使用はしないこと。

★ノイズ等で本製品が誤作動を起こす恐れがあります。



本体背面の通気孔を塞ぐような使い方(布団の上や下に置いたり、壁に寄せて使用するなど)はしないこと。

★本体内部が熱をもち、故障の原因となります。

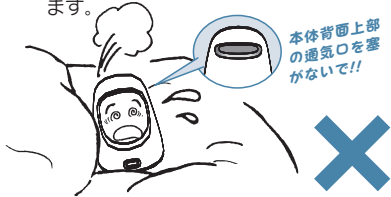

燃えやすい物の近くで使用しないこと。



カフを使用する場合は次の点に注意すること。

★事故や故障の原因となります。

●傷ついたり、破損している場合は使用しないで販売店に問い合わせること。

●濡れていたり、湿っている場合は十分に乾燥させてから使用すること。ドライヤーなどで急激な乾燥はお止めください。

●強く折ったり、きつく丸めて使用しないこと。著しく寿命を縮めます。



使用するときは必ず金属類(ピアス、ヘアピン、ヘアバンド等)を頭部よりはらずこと。

★身体を傷つけるだけでなく、カフを傷つけたり、破裂させたりする原因になります。



頭部に、かぶれや炎症などがある場合は使用しないでください。

## 電源・配線は正しく

感電、火傷などの事故や物的損害、故障の原因となります。

### ⚠ 注意



交流100V以外では使用しないこと。




濡れた手で電源のプラグの抜き差しをしないこと。

★感電の原因となります。



コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないこと。

★タコ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因となります。

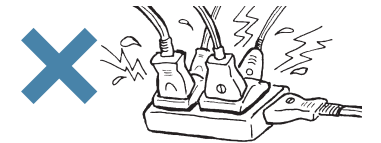

電源プラグはコンセントに確実に差し込むこと。またプラグの破損やコンセントがゆるいときは使用しないこと。

★差し込みが不完全だと感電やショート、発火の原因となります。



使用を中断する場合や使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。



雷や地震、停電時は使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜くこと。

★復帰時に事故や故障の恐れがあります。

## 本体の取扱について

発火、感電などの事故や故障の原因となります。

### ⚠ 警告



本体や付属品を勝手に修理したり、改造したりしないこと。



本体を高い所から落としたり、強い衝撃を与えないこと。

★誤って落とした場合は必ず点検を受けてください。そのときに異常がなくても内部の損傷が進み、後に事故や故障の原因となることがあります。



本体のカバーは絶対に開けないこと。  
★内部は高電圧が発生しており、感電することがあります。

## 本体の取扱について

発火、感電などの事故や故障の原因となります。



**注意**



定められた手順により操作すること。



お子様(12歳以下)には操作させないこと。

★操作を誤り、事故や故障の原因となります。



本体の上に重い物を落としたり飲み物などをこぼさないこと。

★破損したり、内部に水が入ると発火・ショートなどの事故や故障の原因となります。



ホース接続口に金属製の棒やハサミ、ピンなどを差し込まないこと。



他の機器の部品や付属品などを流用しないこと。

★規格や仕様が異なるため事故や故障の原因となります。



## 付属品(カフ・ホース)の取扱について

発火、感電などの事故や故障の原因となります。



**注意**



接続ホースの抜き差しは必ずカブラー部をもって行うこと。

★ホースを持って行くと抜けたり、はずれの原因となります。



作動状態でカブラーの抜き差しはしないこと。

★作動不良の原因となります。



カブラーを踏みつけたり、大きな力を加えたりしないこと。

★カブラーや接続口が破損し、事故や故障の原因となります。



ホースやカフを傷つけたり、無理に引っ張ったり、ねじったり、しないこと。



機器及び付属品を廃棄する場合は、環境の影響を少なくするため、地域で定められている規則に従って処分してください。

## 保管とお手入れについて

けがや感電などの事故や、故障の原因となります。



**注意**

### <本体について>



お子様(12歳以下)の手の届かないところに保管すること。



温度・湿度の高い所で保管しないこと。



お手入れの際は電源プラグを必ずコンセントから抜くこと。また、濡れた手でやらないこと。



変色の原因となるのでシンナー、ガソリン、灯油などの揮発油や磨き粉、熱湯、薬品類で拭かないこと。

★水かぬるま湯を含ませて固く絞った布で拭いてください。

### <カフ・ホース>



●汚れは水または薄めた中性洗剤で湿らせた布を固く絞って拭きとること。  
●絶対に洗わないこと。



勝手に修理したり改造したりしないこと。



アイロンをかけたりしないこと。



強く折りたたんだり、きつく丸めたりしないこと。また、上に重い物を乗せないこと。

## プログラム表示 (P.13参照)

プログラムを4モードから選定することができます。  
Aモード Bモード Cモード Dモード

## プログラム選択 (P.13参照)

プログラムを4モードから選定することができます。

## レベルボタン (P.13参照)

強弱レベルを5段階に調節できます。

## 設定レベル (P.13参照)

レベルボタンにより、設定されたレベルを表示します。

## タイマー機能 (P.12参照)

### タイマーの設定

電源スイッチを入れると自動的に5分にセットされます。  
タイマースイッチ(▲▼)により1分単位で最高30分まで、お好みに合わせて時間の設定が出来ます。

## 電源スイッチ (P.11参照)


主電源スイッチです。

## スタート/ストップ (P.14/15参照)


スタート/ストップスイッチです。

## ケーブル接続口 (P.9参照)

### 付属品

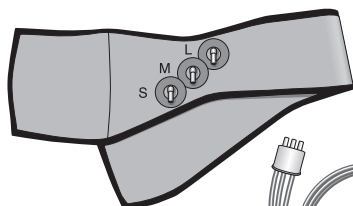

ヘッド用カフ

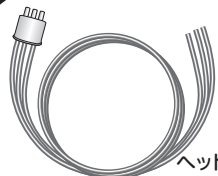


ヘッド用ホース(3連)



取扱説明書  
(本誌)


### 別売品

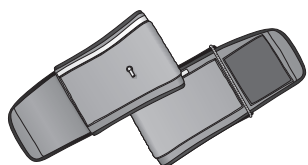

フット&アーム用カフ




フット&アーム用ホース(2連)

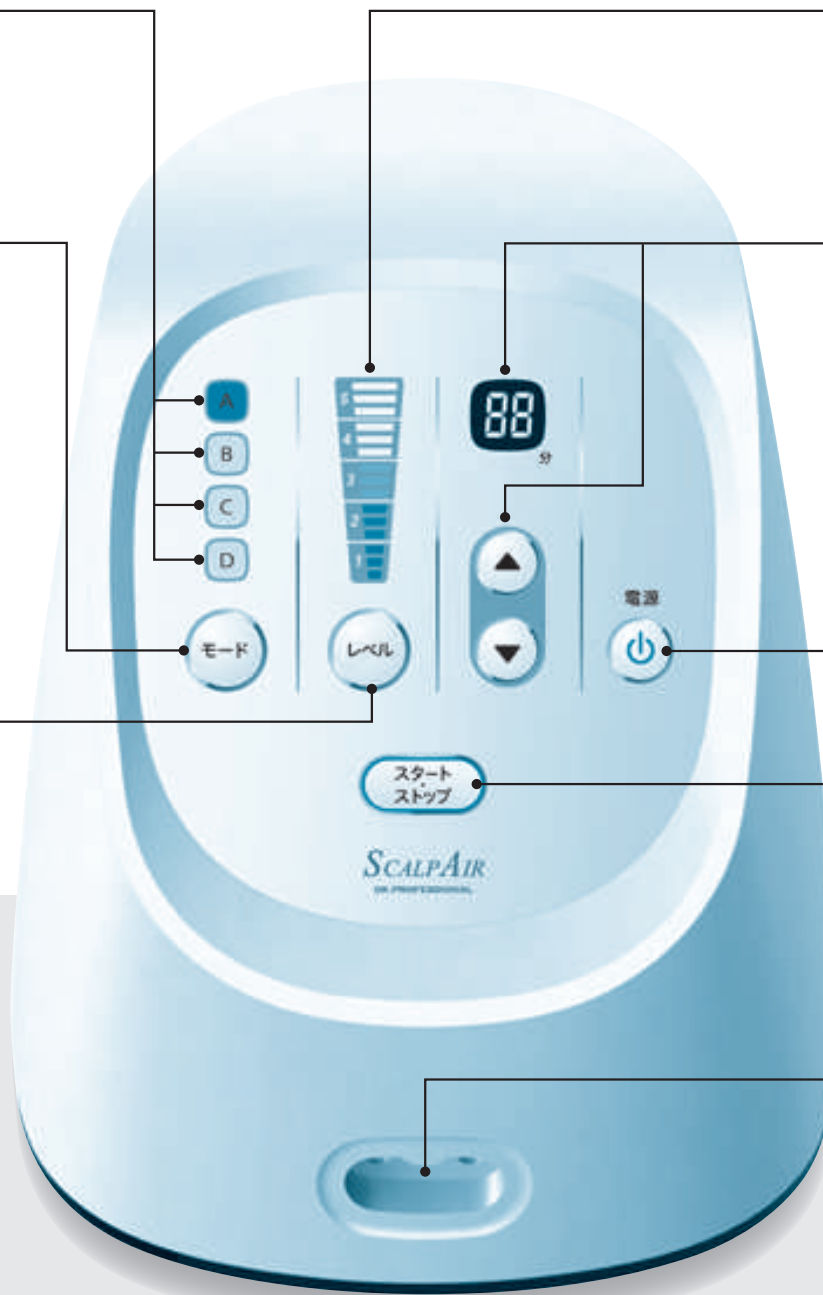

## ◆◆◆◆◆カフの装着◆◆◆◆◆

### 1 カフに接続ホースをつなぎます

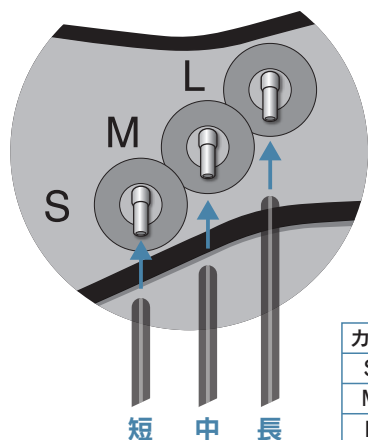

カフ	ホース
S	短
M	中
L	長


カフの3つのホース接続口(S・M・L)にホースの長さ(短・中・長)を合わせて接続してください。

※ホースの接続を間違えますと動作が正しく行われません。必ず位置を正しく合わせてください。


◎ホースを接続するときはカフノズルを根本までしっかり差し込んでください。差し込みが緩いと動作時にホースが脱落することがあります。

### 2 本体にカプラーを差し込みます



カプラーを差し込む時は  の向きを本体に合わせてしっかりと差し込んでください。差し込みが緩いと動作時に脱落することがあります。

凹凸を合わせます

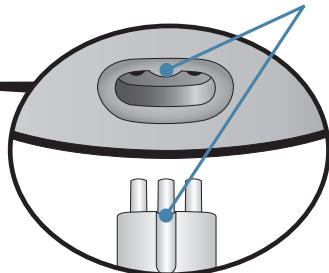


### 3 頭部にカフを装着します



#### 1. 装着する位置を合わせます。

カフの上下(“L”が上にくるようにします。)を合わせて、眉毛に沿うように装着してください。(装着が浅いと使用中にカフがズレ上がります。)

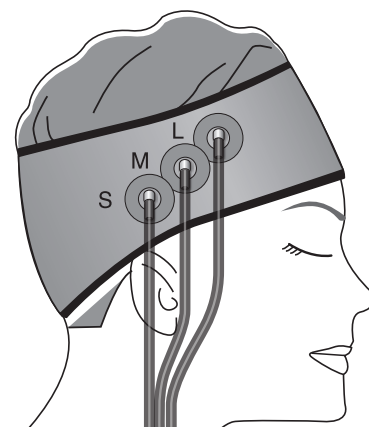

#### 2. カフを固定します。

カフの両端にある面ファスナーで頭部に固定します。頭部にカフを巻き付けるときはズレ落ちない程度にしっかりと固定してください。

## ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 操作手順 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

### 初めに電源をセットします 電源コードをAC100Vコンセントに差し込みます



電源コードを家庭用電源コンセントに差し込むときは必ずプラグ部分をもって確実に差し込んでください。  
※本製品は、日本国内の電源定格に合わせて製造されています。海外ではご使用になれません。

## 1 電源を入れる

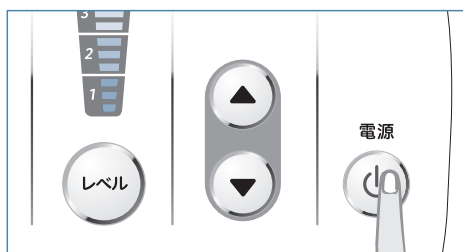


図1

- 電源スイッチをONにします。(図1)  
スイッチを押すと“ピッ”と音がし、各表示が点灯します。(初期設定を表示)(図2)
- 電源を入れてから何も動作を行わないと、5分後に電源が自動的にOFFになります。

### 初期設定



図2

- プログラム、レベル、タイマーモードは初期設定が記憶されており、電源を入れた時は、自動的に初期設定を表示します。

## 2 タイマー設定をする

### タイマー設定

図3



- 初期設定"5"分より設定時間を変更する時は、タイマー設定ボタンでお好みの時間に設定してください。(図3)

- ①タイマー設定ボタンを押すと1分刻みで時間設定ができます。(図3)(最大30分、最短1分)

00 02 03 04 05 06 ~ 30

※タイマー表示が"0"分の時は作動しません。使用時には必ずタイマーを"1"分以上に設定してください。

- ②表示の時間は、作動時のみカウントダウンを行います。

- ③"ピッ"音を5回で終了をお知らせします。(図4)

図4



## 3 強弱レベルを設定する

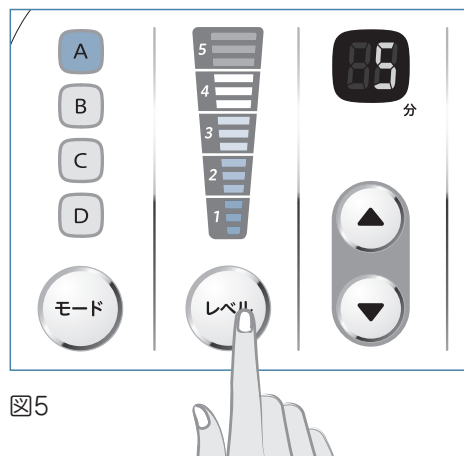


図5

- レベルボタンで最適のレベルを設定してください。(図5)

### ▲ 注意 強弱レベルの注意

初めて本製品をご使用の方は必ずレベル"1"から使い始めてください。

- レベルボタンを押すと、初期設定"1"より"2"→"3"→"4"→"5"と変更ができます。さらにボタンを押すと"5"→"1"へ切り替わります。(図6)

▲ 注意 強さが適切か確認してからご使用ください。いきなり強いレベル("3"以上)に設定してご使用にならないでください。

### ●レベル調整サイクル



図6

## 4 モードの選択をします

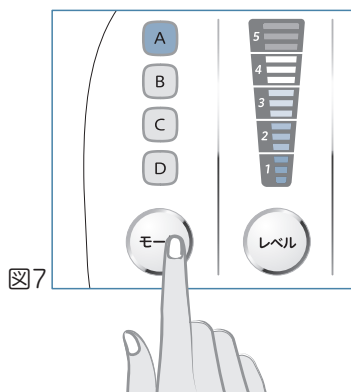


図7

- お好みにあわせて"A"モード、"B"モード、"C"モード、"D"モードのプログラムをお選びください。

※モードボタンを押すと選択できます。各モードにあるモニターランプにより設定モードが確認できます。(図7)

### ●モード変更の注意

作動中にモードボタンを押すと安全のため自動的に作動が停止します。モード変更はスタート/ストップスイッチを押してから行ってください。

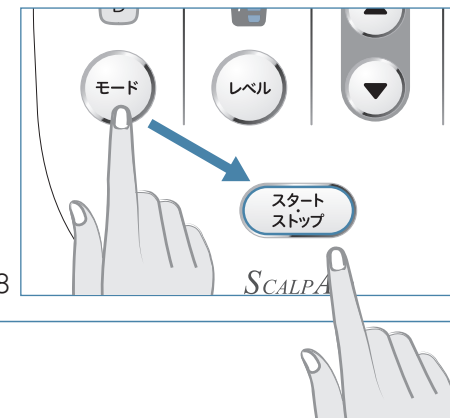


図8

## 5 作動・停止

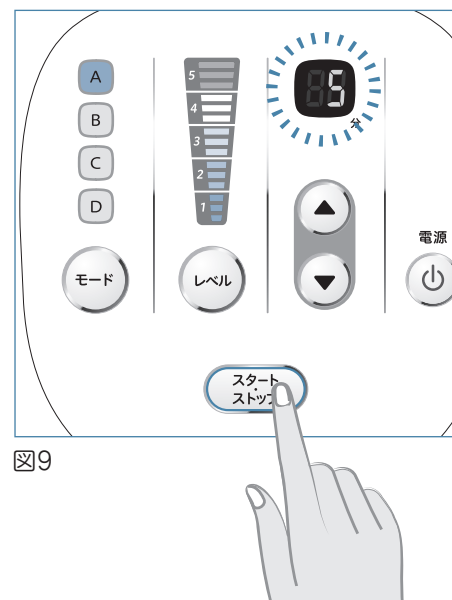


図9

- 全ての設定が終了しましたらスタート/ストップスイッチを押してください。選択したプログラムが開始されます。(図9)

- タイマー表示が(0)になりますと、"ピッ"音5回で終了をお知らせします。(図10)




図10

## ★ 緊急停止をする場合

- 使用中に不具合(体調及び機器故障等)が生じたときは、すぐにスタート/ストップスイッチか電源スイッチを押し、作動を停止させてください。  
選択したモードが点灯します。

## 使用後の注意

- 電源スイッチを押し、“OFF”にしてください。
- カフを頭部よりはずし、ホース接続口よりカブラーをはずしてください。
- 電源プラグをコンセントから抜いてください。

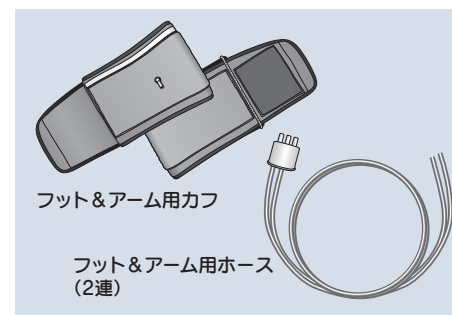

## カフの装着

- 腕への使用は、白いリボンを上にして、二の腕に巻き付けてください。
- 脚への使用は、白いリボンを上にして、ふくらはぎに巻き付けてください。

※キツく巻き付けないよう、ご注意ください。


## 操作手順

P11～P15をご参照ください。

### 使用モード

モード	腕・脚
A	×
B	○
C	○
D	×

白いリボンが上にくるように装着しますと、ホース差込口は下向きになります。

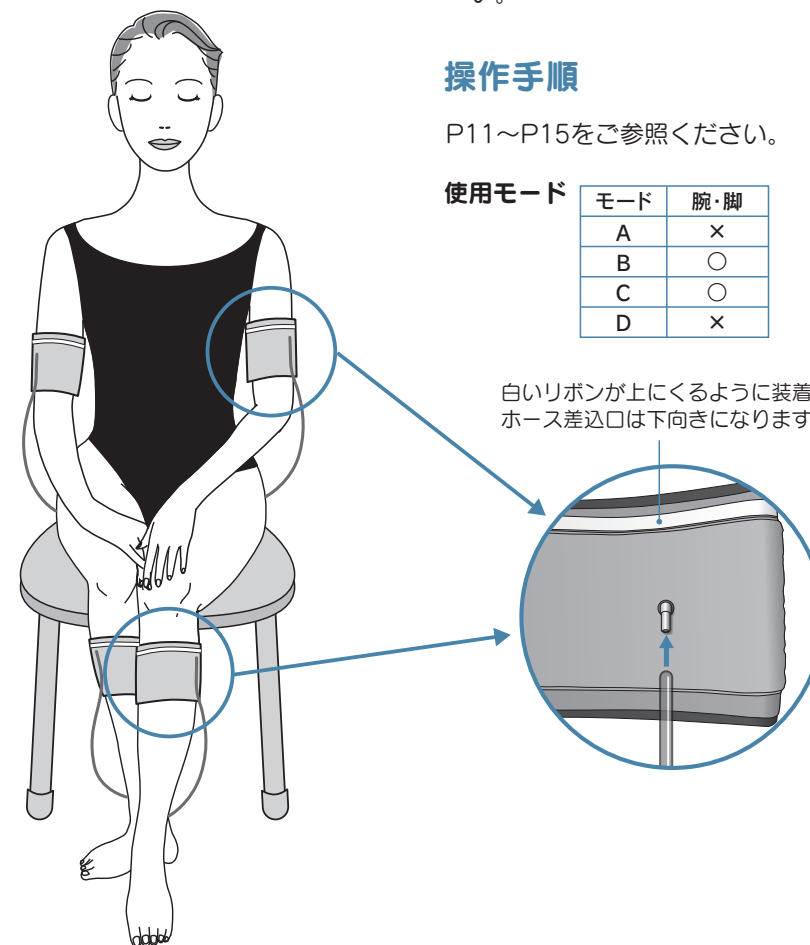

本体部	定 格	AC100V 50/60Hz
	消 費 電 力	18w
	プ ロ グ ラ ム	4モード
	電源コード長	1.5m
	外 形 寸 法	(W)181×(D)184×(H)222m/m
	重 量	約2.3kg
カフ(頭用)	寸 法	(L)690×(W)130m/m
	材 質	ポリエステル
	空 気 室	3室
	ホ ー ス 長	1.5m
カフ(ラット・アーム)	寸 法	(L)575×(W)137m/m
	材 質	ポリエステル
	空 気 室	2室
	ホ ー ス 長	1.5m

○この製品は日本国内向けです。海外ではご使用になれません。